



Устройство для усиления
собственных защитных сил и
корректировки естественных
электромагнитных излучений
природных биосистем

DeVita
Energy

Инструкция по применению • Паспорт

Назначение устройства

Устройство «DeVita Energy» является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных излучениям природных органических систем.

Предназначено для усиления собственных защитных сил и корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот по методам Р.Райфа, Р.Фолля, Ф.Морреля.

Внимание! Устройство может использоваться детьми только под присмотром взрослых. Детям запрещено играть с устройством. Лица с ограниченными физическими возможностями и умственными нарушениями могут использовать устройство только под присмотром соответствующего персонала.

Комплектность

Устройство «DeVita Energy»	1 шт.
Паспорт/инструкция по применению.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.
USB-кабель для зарядки.....	1 шт.
Шнурок на шею.....	1 шт.

Технические характеристики

1. Количество комплексов, шт.	1
2. Диапазон частот, Гц.....	0,1÷15000
3. Погрешность установки частоты не более, %.....	±0,003
4. Время непрерывной работы не менее, час.....	20
5. Тип клавиатуры.....	сенсорная
6. Тип дисплея.....	TFT 128x160
7. Обновление через Интернет:	
- программы управления устройством.....	да
- программ комплексов.....	да

8. Питание:	
- аккумулятор Li-Pol 3,7В, встроенный в устройство, шт.	1
9. Максимальное время зарядки аккумулятора, час.....	6
10. Габаритные размеры не более, мм.....	102x44x15
11. Масса прибора не более, кг.....	0,1
12. Средний срок службы не менее, лет.....	5


Информация о безопасности

Устройство:

- безопасно в использовании;
- нетоксично;
- не является легковоспламеняющимся;
- невзрывоопасно;
- не является источником опасных для здоровья излучений.

При зарядке аккумулятора устройства класса III должны питаться от сетевого адаптера исключительно безопасного низковольтного напряжения.

Защита окружающей среды

Встроенный аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы устройства и перед тем как передать его на утилизацию аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специальных пунктах. 

Извлечение аккумуляторной батареи

1. Открутите три винта на задней панели корпуса устройства.
2. Отсоедините запаянные клеммы батареи от платы.
3. Аккуратно извлеките аккумулятор.

Правила ухода, хранения и транспортировки

Устройство без упаковки должно храниться в помещении при температуре от 10 до 35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Устройство должно быть защищено от прямого попадания влаги и действия активных химических веществ.

Не разбирайте устройство.

Не допускайте падения устройства.

Не допускайте падения на устройство других предметов.

Рекомендуем сохранять упаковочную тару в течение гарантийного срока.

Описание устройства

1. Кнопка включения/
выключения устройства

2. Дисплей


3. Гнездо зарядки

4. Клавиши
перемещения

5. Клавиша выбора
опции

6. Клавиша возврата

7. Светодиод
выполнения программы

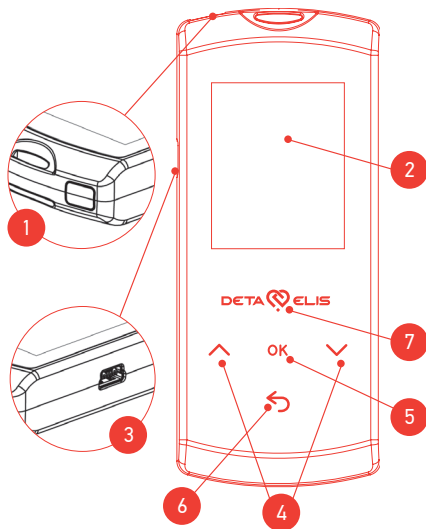

Работа с устройством

Для включения устройства нажмите кнопку¹. Время подсвечивания дисплея составляет 30 сек с момента нажатия последней клавиши. Дисплей можно отключить раньше этого времени повторным нажатием кнопки¹. В случае если дисплей погас до того, как вы ввели нужные команды, его необходимо включить повторным нажатием кнопки¹.

После нажатия кнопки¹ на дисплее появится заставка¹, а через 2 сек устройство автоматически выйдет в режим главного меню².




Работа с главным меню



Подменю «Настройки»

Клавишами перемещения   выберите пункт «Настройки». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится подменю «Настройки»³.

• Выбор языка




Внимание! По умолчанию установлен русский язык. Если нет необходимости менять язык, данный пункт можно пропустить.



Клавишами перемещения   выберите пункт «Язык». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится подменю «Язык»⁴.

Клавишами перемещения   выберите нужный язык. Нажмите клавишу выбора опции .

Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата .




• Настройка звука

Клавишами перемещения   выберите пункт «Звук». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится подменю «Звук»⁵.

Клавишами перемещения   выберите пункт «Вкл.» или «Выкл.». Нажмите клавишу выбора опции. При выборе пункта «Выкл.» звуковое сопровождение нажатия клавиш отключается.

Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата .

• Настройка времени




Клавишами перемещения   выберите пункт «Время». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится подменю «Настройка времени»⁶.

Клавишей выбора опции  выберите окно «Часы», «Минуты» или «Формат».

Клавишами перемещения   установите необходимые часы, минуты или формат.




Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата .

• Об устройстве

Клавишами перемещения   выберите пункт «Об устройстве». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится номер вашего устройства и версия программы.

• Выбор программы

Клавишами перемещения   выберите пункт «Программа»². Нажмите

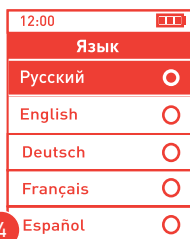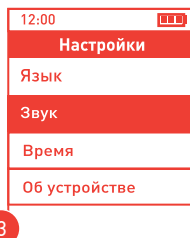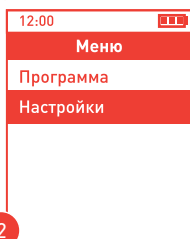

клавишу выбора опции **OK**⁷. Программа запустится, о чем будет сигнализировать мигание красного светодиода под логотипом на панели устройства. На дисплее появится подменю выполнения текущей программы⁸. Таймер в верхней части дисплея отображает время, оставшееся до конца выполнения программы.

• Информация о выполнении программы

При необходимости получения информации о выполнении программы нажмите кнопку¹. На дисплее появится подменю выполнения программы.

• Прерывание программы

Если необходимо прервать выполнение программы, клавишами перемещения **▲▼** выберите пункт «Да» подменю выполнения программы и нажмите клавишу выбора опции **OK**.

• Пользование устройством в режиме работы программы

Сразу же после запуска программы расположите устройство тыльной стороной к телу, например, в кармане.

Зарядка устройства

• Индикатор заряда аккумулятора

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен белым цветом, активны три **■■■** или два **■■** внутренних сектора индикатора – аккумулятор заряжен.

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен красным цветом, активен один **■** внутренний сектор индикатора – заряд аккумулятора на исходе.

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен красным цветом, ни один из внутренних секторов индикатора не активен, на дисплее высвечивается надпись «Зарядите батарею!» – аккумулятор разряжен полностью⁹.

• Зарядка аккумулятора

В случае малой зарядки или полной разрядки аккумулятора подсоедините разъем mini-USB переходного шнура к гнезду зарядки/записи программ устройства, а разъем USB – к USB порту работающего компьютера. Индикатор заряда аккумулятора начнет сигнализировать о процессе зарядки.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства «DeVita Energy» техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.





При отсутствии даты продажи и штампа торговой организации в паспорте, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска устройства предприятием-изготовителем.


В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт. Гарантийный ремонт производится на территории предприятия-изготовителя. Доставка неисправного устройства к месту ремонта осуществляется за счет покупателя.

При нарушении сохранности корпуса устройства и/или при отсутствии гарантийного талона претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- дефекты вследствие неправильной эксплуатации;
- дефекты, вызванные стихийными бедствиями;
- при нарушении сохранности пломб;
- при наличии внешних дефектов (трещин, сколов и др.).

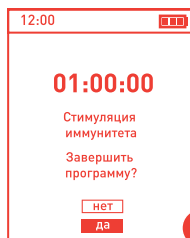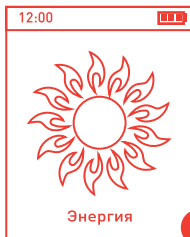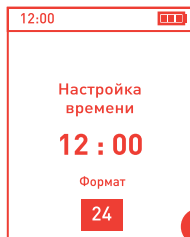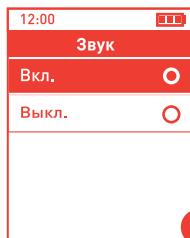

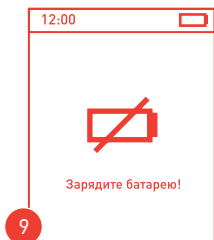

Покупатель имеет право заменить неисправный прибор на новый в следующих случаях:

- прибор ремонтировался три раза в течение гарантийного срока;
- прибор не подлежит ремонту.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию прибора и программное обеспечение без ухудшения существующих характеристик.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания на территории РФ обращайтесь к эксклюзивному дистрибьютору.

ООО «ДЕТА-ЭЛИС ХОЛДИНГ». 124482, Россия, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4 (здание «Бизнес-центра»), офис 1507. Тел.: +7 (495) 981-91-62, +7 (925) 335-41-91.

E-mail: remont@deta-elis.ru. Skype: [deta_remont](#)

Свидетельство о приемке

Устройство «DeVita Energy»

заводской № _____ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Отметка технического контроля:

МП _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 201__ г.

(дата выпуска)



Впервые мысль о наличии в организме человека энергии и зависимости здоровья от ее циркуляции была высказана древними врачевателями Китая, Индии, Египта. Сегодня научно доказано, что каждый орган человека излучает определенные частоты. Под действием неблагоприятных внешних факторов, полной стрессов современной жизни, плохой экологии его частоты отклоняются от своих естественных параметров, в результате чего возникает депрессия, апатия, хроническая бессонница.

Устройство «DeVita Energy» излучает гармоничные электромагнитные частоты, которые выравнивают биоэнергетические показатели человека, запускают функции регуляции организма, основанные на резонансных явлениях, снижают био- и геопатогенные нагрузки. «DeVita Energy» мягко и безопасно воздействует на организм человека, не нарушая его энергоравновесие ни в целом, ни локально.

Этот способ воздействия на организм основан на разработках Франца Мореля – автора метода биорезонансной терапии. Правильно созданная программа электромагнитного воздействия восстанавливает и усиливает физиологические показатели, снимает психоэмоциональное напряжение человека, заряжая его энергией, даря хорошее настроение и прекрасное самочувствие.

Внимание! Устройство имеет противопоказание к использованию беременными женщинами в первом триместре; людьми, перенесшими трансплантацию органов; также теми, кто страдает тяжелыми заболеваниями сердца.

Показания к применению устройства «DeVita Energy»

Применять устройство рекомендуется всем, кому приходится испытывать:

- Физическую и эмоциональную усталость
- Синдром «хронической усталости»
- Большие физические нагрузки
- Депрессию, стрессы
- Головокружение, слабость, сонливость

Эффект после применения устройства «DeVita Energy»:

- Восстанавливает и усиливает физиологические показатели
- Снимает психоэмоциональное напряжение
- Заряжает энергией
- Запускает функции регуляции организма
- Регулирует дренажную функцию организма
- Снижает био- и гепатогенные нагрузки
- Омолаживает

Методика: Прибор использовать 1-2 раза в день в утреннее или дневное время. Не использовать устройство на ночь и более 2 раз в день.

Заключение

Концепция Wellness – здоровое питание, умеренные физические нагрузки, свежий воздух, отказ от вредных привычек – во многом снижает риск возникновения различных заболеваний. Однако в современном мире не всегда удается последовательно придерживаться данной концепции. Особенно это актуально для мегаполисов с их постоянными стрессами, стремительным образом жизни и неблагоприятной окружающей средой.

Устройства «DeVita Energy» призваны помочь организму восстановить утраченную энергию, повысить иммунитет и поддержать жизненный тонус на высоком уровне.

Чем выше энергетика человека, тем лучше состояние его здоровья, тем большим потенциалом и возможностями он обладает для того, чтобы создать свою жизнь такой, какой он хочет.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на гарантийный ремонт прибора «DeVita Energy»

Изъят « ____ » _____ 201__ г.

Ремонт произвел _____

(фамилия, подпись)

линия отреза

ДЕТА-ЭЛИС-Холдинг
124482 Россия, Москва, Зеленоград,
Савелкинский пр., д.4, офис 2408
тел./факс +7(495) 981-91-60/62

Талон № 1

на гарантийный ремонт прибора «DeVita Energy»

заводской № _____

Продано магазином _____

(наименование торговой организации)

Штамп магазина _____

(подпись)

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____ Ремонт произвел _____

(дата)

(подпись)

Владелец _____

(подпись)

Ремонтное предприятие _____

Штамп предприятия « ____ » _____ 201__ г

Ответственное лицо _____

(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

на гарантийный ремонт прибора «DeVita Energy»

ИЗЪЯТ « ____ » _____ 201__ г.

Ремонт произвел _____

(фамилия, подпись)

линия отреза

ДЕТА-ЭЛИС-Холдинг
124482 Россия, Москва, Зеленоград,
Савелкинский пр., д.4, офис 2408
тел./факс +7(495) 981-91-60/62

Талон № 2

на гарантийный ремонт прибора «DeVita Energy»

заводской № _____

Продано магазином _____

(наименование торговой организации)

Штамп магазина _____

(подпись)

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____ Ремонт произвел _____

(дата)

(подпись)

Владелец _____

(подпись)

Ремонтное предприятие _____

Штамп предприятия « ____ » _____ 201__ г

Ответственное лицо _____

(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 3

на гарантийный ремонт прибора «DeVita Energy»

Изъят « ____ » _____ 201__ г.

Ремонт произвел _____

(фамилия, подпись)

линия отреза

ДЕТА-ЭЛИС-Холдинг
124482 Россия, Москва, Зеленоград,
Савелкинский пр., д.4, офис 2408
тел./факс +7(495) 981-91-60/62

Талон № 3

на гарантийный ремонт прибора «DeVita Energy»

заводской № _____

Продано магазином _____

(наименование торговой организации)

Штамп магазина _____

(подпись)

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____ Ремонт произвел _____

(дата)

(подпись)

Владелец _____

(подпись)

Ремонтное предприятие _____

Штамп предприятия « ____ » _____ 201__ г

Ответственное лицо _____

(подпись)



124482, г. Зеленоград, ул. Савёлкинский проезд, д.4.,
здание «Бизнес-Центр», этаж 24., офис 2410
Телефоны: +7 (495) 981 91 60 , +7 (495) 981 91 62
e-mail: info@deta-elis.ru
deholding.org